



**CONCEPT**

## **GRAM ExGuard**

***CABINET FOR EXTRACTION TOXIC ATMOSPHERES***

Gram  
Commercial A/S  
Aage Grams Vej  
6500 Vojens,  
Danmark

**GRAM**  
Biostorage you can depend on

## ExGuard



Afzuiging van gevaarlijke atmosferen.

Brengt een veilige werkomgeving een stap verder.

ExGuard verhoogd de veiligheid, én maakt plaatsing in werkomgeving mogelijk door uw bestaande ventilatiesysteem gevaarlijke stoffen uit de binnenruimte van de kast te laten onttrekken, voordat u toegang tot het interieur krijgt.

Net als alle andere BioLine koelkasten, heeft de ExGuard zowel intern als extern ATEX, Cat.3 Zone 2-conformiteit, waardoor de veiligheid van de werkomgeving zo hoog mogelijk blijft.

### Bedieningspanelen ExGuard koeling

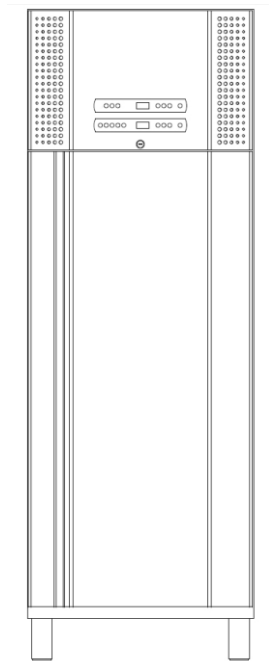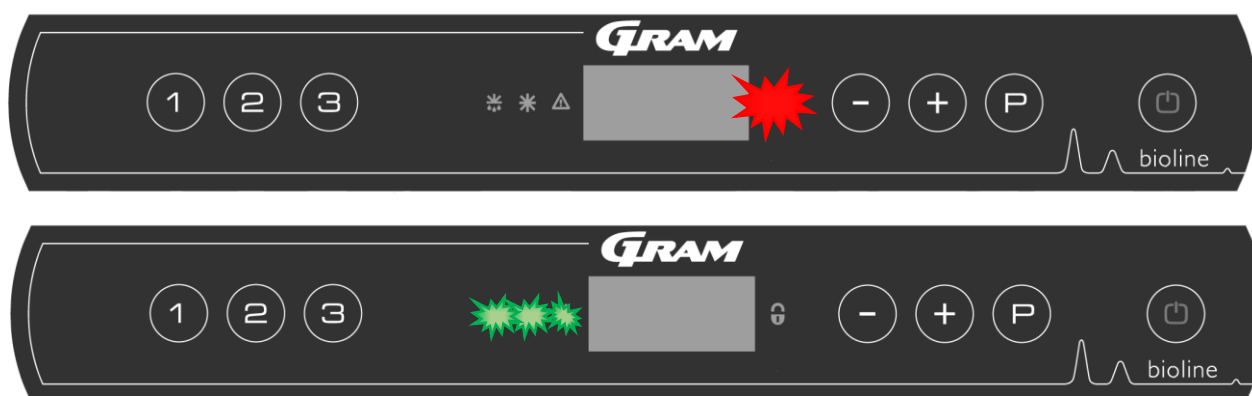

Temperatuurbereik	-2/+20°C
Omgevingstemperatuur	Dichte deur +10/+43°C; Glasdeur +10/+38°C
Besturing	De betrouwbare ExGuard besturing verhindert de toegang tot het meubel totdat veilige afzuiging van het meubel heeft plaatsgevonden. De timing van stappen in de toegangsprocedure kan aan uw specificaties worden aangepast. Een afzonderlijke besturing verzorgt de normale werking van de koeling, conform de BioPlus-range
Inwendig	Roestvaststaal
Uitwendig	Wit gelakt of Roestvaststaal
Afmetingen (mm) B x D x H	840 x 785 x 1990/2240
Bruto inhoud	614 liter
Netto inhoud	486 liter
Isolatie	70 mm HFC vrij cyclopenthaan
Koudemiddel	R 290
Aansluiting	230 V, 50 Hz
Luchtgeleiding	Gram BioLine luchtgeleidingssysteem
Ontdooiing	Smart Defrost met automatische ontdooiing en dooiwater verdamping